

CUNEI ELASTICI

Cunei elastici in silicone, utilizzabili come cunei di fissaggio e in qualità di cordini/fili di stabilizzazione delle dighe dentali.
Disponibili in due spessori con codifica colore.











200

REF 3571 cunei elastici BLU, spessore 2,5 mm - 10 pz.
REF 3572 cunei elastici GIALLI , spessore 2,0 mm - 10 pz.
REF 3570 assortimento cunei elastici - 40 pz.

PINZA DI POSIZIONAMENTO

Pinza per anelli di fissaggio. Dotata di speciali stoppers che facilitano il posizionamento dei cunei elastici.



PORTA RULLI

Porta rulli di cotone in acciaio inox. Non ostacola la visibilità del campo operatorio. Mantiene la superficie di lavoro sempre asciutta.







Un sistema di *prima* classe per RESTAURI DI CLASSE II

PERIDENT DENTAL PRODUCTS

Via del Fornaccio 46/F - località Vallina 50012 Bagno a Ripoli (FIRENZE)
Tel. 055 69 65 40 - Fax 055 69 69 00 - www.perident.it - e-mail: info@perident.it









SISTEMA DI MATRICI SEZIONALI

Sistema semplice e pratico per realizzare punti di contatto precisi e anatomicamente corretti nei settori posteriori.

Matrici sezionali bombate in acciaio inox, disponibili in tre altezze Small, Medium e Large; normali o con estensione per preparazioni cervicali estese. Applicabili su superfici mesiali e distali.

Anello Standard in acciaio inox autoclavabile. Utilizzabile con estremità cilindriche (small e large) e triangolari blu e verdi.

Anello Delta in acciaio inox autoclavabile, con punte ferma-cuneo. Impiego ideale con le estremità triangolari in silicone blu e verdi.



Contenuto del Kit

- 1 anello Standard
- 1 anello Delta
- 100 matrici sezionali, acciaio hard spessore 0,035 mm (20 Small, 30 Medium, 20 Large, 10 Small con estensione, 10 Medium con estensione, 10 Large con estensione)
- 10 1110414111 0011 0010110110110, 10 1



Vantaggi

- Punti di contatto ottimali
- Matrici disponibili in tre altezze
- Anelli Standard e Delta
- Anello Delta con punte ferma-cuneo
- Molteplici combinazioni Anelli Estremità



ESTREMITA' CILINDRICHE PER ANELLI

Estremità cilindriche in silicone da applicare all'anello Standard, disponibili in due misure: Small (bianche) e Large (trasparenti). Facilitano la stabilità della matrice lontano dal punto di contatto anche in caso di cavità emolto estese.




REF 3550

REF 3552

REF 3551

ESTREMITA' TRIANGOLARI PER ANELLI

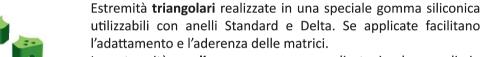

Le estremità **verdi** possono essere applicate in due modi: in caso di piccole cavità, con le punte rivolte verso l'interno (fig. 1), assicurano l'aderenza della matrice lungo tutta l'altezza del dente e possono sostituire il cuneo. Per il rispristino di cavità estese, impiegate con le punte rivolte verso l'esterno (fig. 2), stabilizzano la matrice lontano dal punto di contatto.

Le estremità **blu**, grazie alla punta più corta, lasciano libero lo spazio di lavoro adiacente al punto di contatto.







Fig. 2

REF 3550 Estremità cilindriche per anelli - 40 pz (20 bianche Small, 20 trasparenti Large)

REF 3551 Estremità triangolari per anelli VERDI - 40 pz

REF 3552 Estremità triangolari per anelli BLU - 40 pz



Sectional Matrix System

MATRICI SEZIONALI



Matrici sezionali bombate realizzate in acciaio inox hard (per un facile inserimento) e soft (per un migliore adattamento al dente). Disponibili in tre altezze Small, Medium e Large; normali o con estensione per preparazioni cervicali estese. Spessore 0.035 mm.

Codici Confezioni da 50 pz	9	9	U	6	9	0	
Matrici sezionali Spessore 0,035 mm	Small	Medium	Large	Small con estensione	Medium con estensione	Large con estensione	
acciaio hard REI	3501	3502	3503	3507	3508	3509	
acciaio soft REF	3504	3505	3506	3510	3511	3512	



ANELLI DI FISSAGGIO

Standard: in acciaio inox autoclavabile. Utilizzabile con le Estremità cilindriche e triangolari.

Delta: in acciaio inox autoclavabile, con punte ferma-cuneo. Utilizzabile con le Estremità triangolari.



punte ferma-cuneo



